

▶ CP301-CP101



产品特点 Product Features

- 噪音更低，真正实现枕边使用
Absolute low noise, under 40 dB(A)
- 功率更低，绿色环保，省电节能
lower power consumption, saving the operation cost
- 轻便设计，结构紧凑，可随意移动
compact design, lightweight
- 整机两年保修，压缩机三年保修
2 years warranty for concentrator and 3 years warranty for compressor
- 可持续24小时使用，性能持续稳定
24/7 continuous operation with stable performance
- 感光式液晶显示屏，让你爱眼更舒适
LED display panel for comfortable view
- 整机一键控制，更适合老年人使用
one-button control, convenient for aged users
- 报警系统完善，全方位监控产品运转
Accurate alarm system, easy to monitor device's operation

医用级，稳定供氧

Medical grade, stable oxygen supply

开机50秒氧浓度即可达到90%以上

Boot 50 seconds, oxygen purity can up to 90%



性能参数 Technical Specification

产品型号 Product Model	CP301	CP501	CP801	CP101
生产许可证编号	粤食药监械生产许20112047号			
注册证编号	粤械注准20162541548			
产品技术要求编号	粤械注准20162541548			
产品性能规格 Technical Specification				
流量 (Flow)	1L-3LPM	1L-5LPM	1L-8LPM	1L-10LPM
出口压力 (Pressure)	(40-60) kPa	(40-60) kPa	(40-60) kPa	(40-60) kPa
电压/电源频率 Voltage/Frequency	220V/50Hz±1Hz or 115V/60Hz			
氧浓度 (Purity)	93%±3%	93%±3%	93%±3%	93%±3%
使用环境 Operation Environment	温度范围 Temperature—5℃ to 40℃ 相对湿度范围 Humidity≤80% 大气压力范围 Atmospheric pressure 86kPa—106kPa			
消耗功率 Power Consumption	210VA(平均)	300VA(平均)	480VA(平均)	650VA(平均)
重量 (Weight)	11.8Kg	14.5Kg	19.5Kg	20.5Kg
噪音 (Noise)	<43dB(A)	<45dB(A)	<48dB(A)	<52dB(A)
规格 (Dimension) L*W*H (mm)	400mm×300mm×540mm			
运输/储存条件 Transportation/Storage Condition	温度范围 Temperature—5℃ to 40℃ 相对湿度范围 Humidity≤80% 大气压力范围 Atmospheric pressure 86kPa—106kPa			
设备的等级和类型 Equipment Class & Type	设备等级 Class II B型应用部分			
OCS\氧浓度探测指示 OCS\ indicator (OPTIOANL)	低于82%±3时，显示黄色指示灯 低于72%时，显示红色（需要服务）指示灯 82%±3 below YELLOW, 72% below RED			
雾化流量 Nebulization Flow (OPTIOANL)	≥6LPM	≥6LPM	≥8LPM	≥8LPM
雾化颗粒大小 Nebulizer Partical Size	≤5 microns	≤5 microns	≤5 microns	≤5 microns

知名设计公司作品，流线外形更符合亚洲客户审美观念，小巧时尚，可以更好
地与用户室内装饰风格搭配。

MIC Medical works with renowned designing company to launch this stylish,stream
line device to better match with user's decoration style.



小型医用制氧机

MIC OXYGEN CONCENTRATOR SERIES

▶ CP302-CP502

液晶显示屏 DISPLAY PANEL

- 1.绿色电源指示灯——机器开始运转
- 2.绿色指示灯——氧气输出正常
- 3.黄色提示灯——氧气输出浓度低
- 4.红色警示灯——请联系维修服务
- 5.数字显示槽：

累积计时： 数字显示

系统的压力状况： 显示lo-p—低压报警/显示hi-p—高压报警

氧气浓度状况： 显示lo-o2—低氧浓度报警

机身温度状况： 显示hi-t—高温报警


1.Power indicator(White light) device is operating regulately

2.Normal oxygen(White light) oxygen purity is under normal condition

3.Low oxygen(yellow light) oxygen purity is below 82%,ask for service

4.Alarm(red light) turn this device off and contact your device supplier for service immediately

5.Digital Display Slot : Cumulative Timing Digital Display; Display code meaning lo-p low pressure / hi-p high pressure;
lo-o2 low oxygen purity; hi-t the device is high temperature

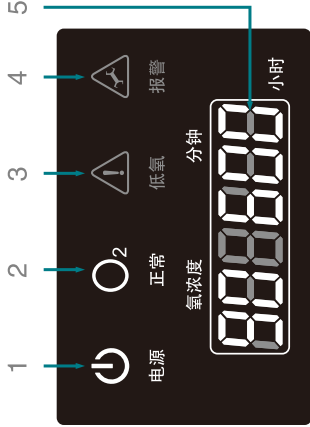

医用级，稳定供氧

Medical grade, stable oxygen supply

开机50秒氧浓度即可达到90%以上

Boot 50 seconds, oxygen purity can up to 90%



性能参数 Technical Specification

产品型号 Product Model	CP302	CP502
生产许可证编号	粤食药监械生产许20112047号	
产品注册证编号	粤械注准20162541548	
产品技术要求编号	粤械注准20162541548	
产品性能规格 Technical Specification		
流量 (Flow)	1L-3LPM	1L-5LPM
出口压力 (Pressure)	(40-60) kPa	
电压/电源频率 Voltage/Frequency	220V/50Hz±1Hz or 115V/60Hz	
氧浓度 (Purity)	93%±3%	93%±3%

使用环境 Operation Environment

温度范围 Temperature—5℃ to 40℃ 相对湿度范围 Humidity ≤ 80%

大气压力范围 Atmospheric pressure 86kPa—106kPa

消耗功率 Power Consumption	210VA(平均)	300VA(平均)
重量 (Weight)	11.8Kg	14.5Kg
噪音 (Noise)	<43dB(A)	<45dB(A)
规格 (Dimension) L*W*H (mm)	400mm×300mm×540mm	
运输/储存条件 Transportation/Storage Condition	温度范围 Temperature—5℃ to 40℃ 相对湿度范围 Humidity ≤ 80% 大气压力范围 Atmospheric pressure 86kPa—106kPa	
设备的等级和类型 Equipment Class & Type	设备等级 Class II B型应用部分	
OCSl氧浓度探测指示 OCSL indicator (OPTIOANL)	低于82%±3时，显示黄色指示灯 低于72%时，显示红色 (需要服务) 指示灯 82%±3 below YELLOW, 72% below RED	
雾化流量 Nebulization Flow (OPTIOANL)	≥6LPM	
雾化颗粒大小 Nebulizer Partical Size	≤5 microns	